

Handleiding Personenalarmering Overal

ZINMOBILE



ZINTOUCH
care.connect.protect


Belangrijke informatie voor het eerste gebruik

- Zet het alarmeringsapparaat voor het eerste gebruik minimaal 2 tot 3 uur in het oplaadstation.
- Lees deze handleiding zorgvuldig door.


Het apparaat leren kennen

Onderdelen van het alarmapparaat


Voorkant

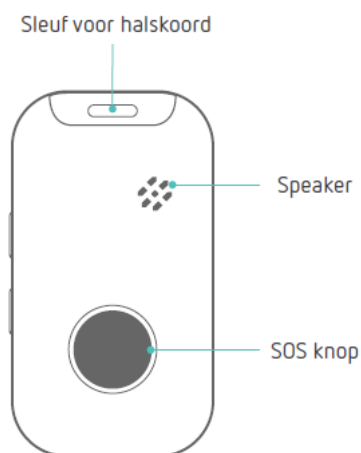

Zijkant

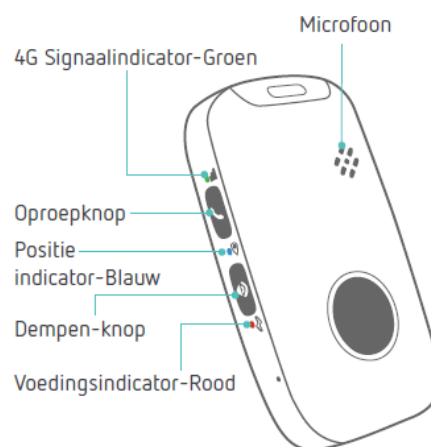


Achterkant

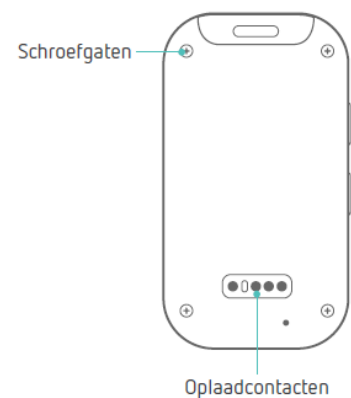


Onderdelen van het basisstation

Voorkant

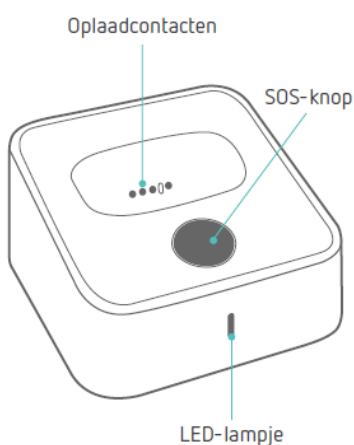


Achterkant

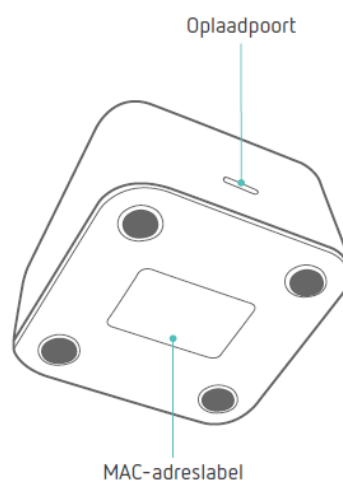

Opladen van het alarmapparaat

Het apparaat kan worden opgeladen via het basisstation.

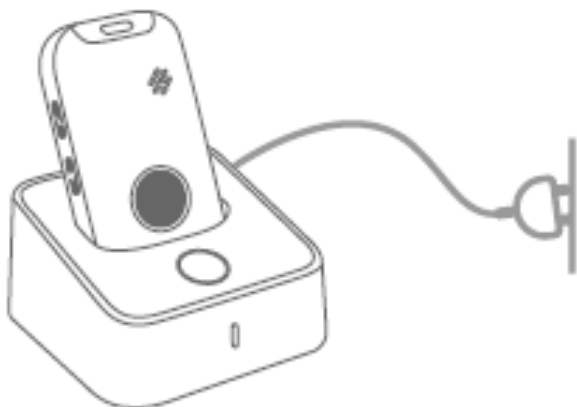

- Rol het bijgeleverde oplaadsnoer uit en sluit deze aan op de adapter.
- Steek de USB-C stekker in het basisstation
- Stop de adapter in het stopcontact (het oplaadstation heeft geen ingebouwde batterij).
- Het oplaadstation is nu klaar voor gebruik.
- Plaats het alarmapparaat rechtop in het oplaadstation.
- Het witte lampje op het basisstation brandt wit gedurende het opladen

Nadat het alarmeringsapparaat is opgeladen, kunt u het alarmeringsapparaat uit het oplaadstation halen en om uw nek dragen. Op deze manier heeft u het alarmeringsapparaat altijd bij u.

Belangrijk

- De batterij van de het alarmeringsapparaat gaat 3 tot 5 dagen mee.
- We raden u echter aan om deze routinematig elke dag **minimaal een uur** in het oplaadstation te zetten, zodat u gegarandeerd bent van een voldoende volle batterij.

In- en uitschakelen van het alarmapparaat

Inschakelen

- Druk gedurende 1 seconde op de CALL-knop (knop aan de zijkant met het symbool van een telefoon).
- Alle LED-lampjes zullen snel knipperen.
- Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u deze oplaadt.



Uitschakelen

- Houd de de CALL-knop (knop aan de zijkant met het symbool van een telefoon) en de SOS-knop aan de voorkant tegelijkertijd ingedrukt gedurende 3 seconden
- Het apparaat is uitgeschakeld als alle LED-lampjes uit zijn.



Het maken van een SOS-alarmoproep

U kunt op 2 manieren een alarmoproep maken; via het alarmapparaat of via het basisstation

Houd 3-5 seconden
ingedrukt



Houd 3-5 seconden
ingedrukt



Alarmoproep via het alarmapparaat

Alarmoproep via het basisstation

- Om een alarmoproep te maken, drukt u **3 tot 5 seconden** op de SOS-knop aan de voorkant van het alarmapparaat of de SOS-knop op het basisstation totdat u de gesproken melding hoort dat de oproep is geactiveerd.
- Na enkele ogenblikken is er verbinding met de zorgcentrale of met één van de contactpersonen.
- De spreek-luisterverbinding loopt via het alarmapparaat. U kunt vertellen wat er aan de hand is en het antwoord horen.

Belangrijk!

- Als het druk is bij de zorgcentrale of de contactpersonen, dan kan het iets langer duren voordat u verbinding heeft.
- We raden u aan om af en toe een testoproep te maken, zodat u weet hoe het alarmeringsapparaat werkt.

Lampjes op het alarmapparaat

Aan de zijkant van het alarmeringsapparaat zitten lampjes in verschillende kleuren; **rood**, **groen** en **blauw**. Elke kleur lampje heeft zijn eigen functie. U hoeft alleen maar bij de volgende lampjes iets te doen (met de overige lampjes hoeft u niets te doen):



Batterijstatus

- Snel knipperen – batterijniveau is **onder** de 20%
- Langzaam knipperen – batterij laadt op
- Uit – batterijniveau is **boven** de 20%



Netwerkstatus

- Langzaam knipperen – het apparaat is verbonden met het mobiele netwerk



Locatiestatus (GPS)

- Langzaam knipperen – de locatie van het apparaat wordt doorgegeven



Overige belangrijke informatie

- Het alarmapparaat is waterdicht (IP67). Wel adviseren wij u deze niet te lang ondergedompeld te houden en contact met stoffen zoals zeep, zout- of chloorwater te vermijden (deze kunnen op den duur de werking aantasten).
- Het alarmapparaat kan veilig gebruikt worden door personen met een pacemaker. Wel is het raadzaam acht te slaan bij lichamelijke veranderingen tijdens het dragen van het apparaat om de hals. Neem in dat geval contact met uw arts op. Het stroomverbruik van ons apparaat is 4600GS $\pm$ 300.
- Reinig af en toe de contactpunten aan de achterkant van het alarmapparaat met een schone (eventueel licht vochtige) doek zodat deze goed contact maken bij het opladen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of iets dergelijks.

Specificaties

- Afmetingen: 67,3 mm * 37,7 mm * 15 mm
- Gewicht: 43 g
- Batterij: 3,7V, 720mAh (Li-Polymeer)
- Oplaadspanning: 5V DC
- Waterdicht: IP67
- 4 locatie-technologieën: GPS, Bluetooth, Wi-Fi, LBS0

Vragen en storingen

- Voor **vragen** over het alarmapparaat en het gebruik kunt u contact opnemen met de **Klantenservice**
Telefoonnummer: 088 – 2052 800
E-mail: klantenservice@personenalarmering.eu
- Bel bij een **defect of storing** aan uw alarmapparaat naar onze **Storingslijn** (24 uur bereikbaar)
Telefoonnummer: 088 – 2052 888

